

ACTION®

IDEAS IN MOTION™

Katalog antidekubitních a polohovacích podložek

- unesou každou hmotnost bez poškození
- propouští rentgenové paprsky
 - samy odstraňují poškození jako propíchnutí a proražení, v případech většího poškození lze použít záplaty na opravy podložek
- bez latexu, materiál podobný tkáni, s některými vlastnostmi pokožky, lze je použít přímo na tělo pacienta, případně použít kontaminační nebo tkaný kryt
- jednoduché čištění dezinfekčními prostředky, antimikrobní vlastnosti, dezinfekce běžnými dezinfekčními prostředky
 - nehořlavé, samozhášecí
- efektivní vzhledem k ceně, znovu použitelné, trvanlivé a jednoduše opravitelné
- neabsorbují tělesné pachy nebo tekutiny

Výrobce: **ACTION PRODUCTS, INC.**
22 N. Mulberry St.
Hagerstown, MD 21740
USA

Tlaková poškození a porušení kůže jsou vážným problémem, se kterým se chirurgičtí profesionálové, zdravotnický personál a jejich pacienti setkávají každým dnem. Také náklady vynaložené na léčbu těchto onemocnění nejsou zanedbatelné. Podložky a polohovadla Action zabraňují dekubitním vředům tím, že rovnoměrně rozkládají kolmý tlak, snižují tangenciální tlak a rozptylují teplo.

Kolmý a tangenciální tlak jsou hlavní příčiny kapilárního uzavření na povrchu kůže, nedostatečného přívodu kyslíku a výživy a následovně rozpadu tkáně tzn. vzniku vředových chorob. Teplo a vlhkost jsou dva faktory, které jsou považovány za katalyzátory v procesu porušení kůže. Schopnost kontrolovat tyto faktory a zmírnění rozvoje a šíření "zarudlých skvrn" v místech vyššího působení tlaku pomůže minimalizovat pacientovo riziko. Zajištění lokálního prokrvení je nezbytné v prevenci před otláčeninami, proleženinami, dekubity, distorzními, trofickými nebo ischemickými vředy a dalšími tlakovými onemocněními.



Tlaková poškození mají množství různých jmen jako: otláčeniny, proleženiny, dekubitní vředy, distorzní vředy, trofické vředy a nebo ischemické vředy. Jsou to ohraničená místa ulcerace a celulární nekrózy. Jedná se o ohraničené plochy ulcerací a buněčných nekróz. Poškození není omezeno na pokožku, ale prostupuje svaly, tukem a kostí. Každý pacient, který se podrobuje chirurgickému zákroku, je tlakovým poškozením vážně ohrožen, zvláště starší pacienti nebo pacienti se slabým krevním oběhem.

Ačkoliv tlaková poškození nejčastěji vznikají na místech, kde jsou kosti těsně pod povrchem těla, mohou se vyvinout na jakékoli tkáni v důsledku dlouhotrvajícího svislého tlaku, zvláště pokud je tlak kombinován s teplem. Teplo urychluje vznik tlakových vředů tím, že zvyšuje metabolické požadavky, kterou tělo nemůže uspokojit.

Jiným druhem tlaku, který zapříčiňuje několik tlakových poškození, se nazývá tangenciální tlak. Důsledky namáhání se projeví vždy, když mechanický tlak působí paralelně na povrch tkáně a na kůži vytváří záhyby.

Podložky a polohovadla Action® zabraňují dekubitním vředům tím, že rovnoměrně rozkládají kolmý tlak, snižují tangenciální tlak a rozptylují teplo.

Podložky Action® jsou využívány na operačních sálech, na prakticky všech typech nemocničních oddělení, jsou velmi vhodné pro tělesně postižené i pro domácí použití.



Prevence je nejlevnější.

Antidekubitní a polohovací podložky Action se prodávají ve více než 42 zemích po celém světě. Je již mnoho institucí, které spoléhají při prevenci svých pacientů před poškozením tkáně nebo nervů způsobeným tlakem na Action. Provizorní používání srolovaných ručníků, písku, molitanu, vaků s tekutinou a pěny nemůže poskytnout pacientům takovou ochranu, kterou požadují.

40100 Profesionální operační podložka (střední délka)

Tato stolní podložka je použitelná pro široký rozsah procedur. Zvláště je důležitá pro použití při procedurách trvajících déle než 1 hodinu nebo pro pacienty s cirkulačními problémy. Při zdlouhavých operacích jako je otevření srdce nebo jiné případy vyžadující, aby pacient dlouhodobě ležel na zádech je tato podložka ideální. Dále tuto podložku doporučujeme pro použití v pediatrii a může být doplněna s podložkou 40105 pro použití na velkém stole. Rozměr: 1170 x 50 x 13mm.



40101 Profesionální operační podložka (plná délka)

Tato podložka je prodlouženou modifikací 40100. Pokrývá celý stůl a rovnoměrně rozkládá tělesnou hmotnost pacienta např. při otevření srdce a jiných operacích hrudi nebo břišní oblasti. Protože poskytuje vysoký komfort pro pacienty s místním umrtvením, jako např. při operaci šedého zákalu, je pohyb pacienta minimalizovaný. Použití podložky je možné i v případech, kdy pacient leží na břicho nebo na boku. Rozměr: 1830 x 500 x 13mm.



40102 Kontaminační kryt

Tento kryt slouží jako doplněk k modelům 40100 a 40101. Je doporučen pro případy s vysokým rizikem infekce. Zároveň tento kryt zvyšuje životnost podložek a napomáhá jejich čištění.




40103 Profesionální operační podložka s perineálním výstřihem

Tato podložka byla vinuta pro použití v litotomické pozici, a může být použita v mnoha dalších aplikacích na operačních sálech i v urologických ordinacích. Rozměr: 1170 x 500 x 13 mm

40104 3-dílná podložka na velký segmentový stůl

Tato sestava zahrnuje podložku hlavy, střední části těla a nohou a slouží pro použití na segmentových stolech, jako je Amsco. Je ideální pro širokou oblast použití a zajišťuje rozprostření tlaku na celou plochu stolu.

- A Podložka pro oblast hlavy
508 x 229 x 13 mm
- B Podložka pro střední část těla s perineálním výstřihem
508 x 1003 x 13 mm
- C Podložka pro oblast nohou s perineálním výstřihem
508 x 508 x 13 mm

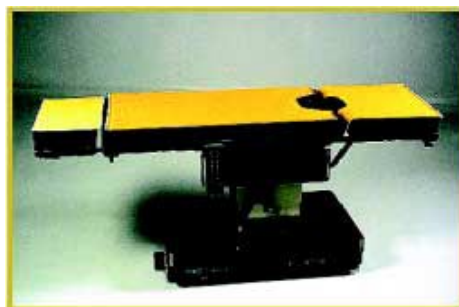

40105 *Stolní podložka*

Univerzální podložka vhodná pro urologické lavice, ordinace a vyšetřovací stoly. Je vynikající pro jakékoliv ortopedické nebo kardiovaskulární procedury. Může být použita spolu s modelem 40100 nebo 40103, čímž získáme podložku pro celý velký stůl. Tato podložka může být také stočena a použita pod záda, ramena nebo kolena. Často je využívána pro podpěry nohou při gynekologických procedurách a pro rektoskopickou podporu proktologických zásahů. Rozměr: 508 x 508 x 13 mm



40200 *Podložka pod hlavu s přizpůsobivým středovým věncem*

Tato podložka pod hlavu může být použita pro většinu pozic vleže na zádech. Po uložení pacientovy hlavy na podložku se středový věnec sám přizpůsobí tvaru hlavy, čímž je zajištěna maximální podpora a prevence otlaků. Rozměr: 229 x 250 x 57 mm



40201 *Kruhová podložka hlavy*

Jedná se o podložku vyvinutou pro ochranu a uložení hlavy, přičemž je zároveň umožněn snadný přístup k oblasti hlavy a krku. Může být použita při nejrůznějších procedurách, včetně ENT, plastických, obecných, očních a krčních zásahů i operacích hlavy. Rozměr: 205 x 45 mm



40202 *Pediatrická kruhová podložka hlavy*

(identická konstrukce s 40201)

Tato podložka je vyvinuta pro pediatrii a může být použita při ENT, plastických, obecných, očních a krčních zákrocích i operacích hlavy. Rozměr: 140 x 32 mm

40203 *Neonatální kruhová podložka hlavy*

Použití je stejné jako u modelů 40201 a 40202, identická je i konstrukce. Podložka je rozměrově menší pro přizpůsobení operacím neonatálních pacientů. Rozměr: 83 x 20 mm

40212 *Kruhová podložka hlavy*

Tato podložka je stejná jako model 40201, ale poněkud vyšší za účelem poskytnutí vhodnější polohy hlavy nebo krku. Rozměr: 205 x 75 mm



40218 *Kruhová podložka hlavy*

Rozměr: 203(vnější průměr) x 114(vnitřní průměr) x 44 mm

40204 Podkovovitá podložka pod hlavu

Podložka je vyvinuta pro polohy vleže na břicho nebo na boku. Tvar podkovy umožňuje přívod čerstvého vzduchu nebo anestetik, leží-li pacient na břicho nebo na boku. Rozměr: 205 x 45 mm



40205 Pediatrická podkovovitá podložka

Identická s modelem 40204, ale rozměrově menší. Rozměr: 205 x 57 mm

40206 Neonatální podkovovitá podložka

Jedná se o menší provedení modelu 40205. Rozměr: 83 x 20 mm



40211 Podkovovitá podložka pod hlavu

Tato podložka je stejná jako model 40204, ale poněkud vyšší za účelem poskytnutí vhodnější polohy hlavy nebo krku. Rozměr: 205 x 75 mm



40207 Laterální podložka pod hlavu se středovým věncem

Tento model je určen pro laterální operační zákroky. Zabraňuje otlakům na pacientových tvářích a uších. Může být použit pro dosažení vhodné výšky polohy pacienta pro nejsnadnější přístup operujících. Rozměr: 230 x 250 x 25 mm

40208 Chránič čela

Tento model má polokruhový profil a rovnou podstavu. Používá se pro ochranu čela jak pro novorozence tak i pro děti a dospělé pacienty, aby nedošlo k otlacení kyslíkovými trubicemi atd. Rozměr: 64 x 41 x 16 mm



40209 Opěrka hlavy pro oftalmologii

V této podložce je profilové vybrání pro stabilní uložení hlavy pacienta. Je použitelná při všech operacích očí, oblasti úst a tváří. Poskytuje vysoký komfort pro pacienty s lokálním umrtvením a minimalizuje jejich pohyb. Tvar podložky zároveň umožňuje chirurgům použití podpůrného ramene. Rozměr: 310 x 270 x 100 mm



40210 Opěrka hlavy pro oftalmologii

Jedná se o zmenšenou variantu modelu 40209. Taktéž použití v chirurgii je stejné jako u modelu 40209. Rozměr: 310 x 250 x 73 mm

40213 *Profilovaná podložka hlavy*

Profil této podložky zajišťuje optimální stabilitu pacientovy hlavy při poloze vleže na zádech. Může být však použita i pro ochranu kolenní nebo lýtkové otlaky. Rozměr: 180 x 180 x 80 mm

**40217** *Profilovaná podložka hlavy*

Rozměr: 229 x 229 x 38 mm

40217P *Profilovaná podložka hlavy - pediatrická*

Rozměr: 190 x 216 x 57 mm

40300 *Malá podložka pod ruku*

Podložka je vhodná pro použití na standardních stolech, které jsou rozšířeny o rameno pro podporu ruky, aby chránila pacientův biceps, loket a oblast předloktí. Tato podložka může být také stočena a použita jako polohovací podložka pro těžko přístupné oblasti, zvláště v pediatrii. Rozměr: 100 x 380 x 6 mm

**40301** *Velká podložka pod ruku*

Stejná podložka jako model 40300, ale přizpůsobená pro větší délku ruky. Rozměr: 115 x 610 x 10 mm

**40302** *Souprava podložek pro podpěru ramen*

Tato podložka je určena pro pacienty v Trendelenburgově poloze, aby chránila oblast ramen. Může být však použita také při jiných aplikacích, kdy je třeba použít podpory nebo opěrky k podepření pacienta, např. na ledviny. Rozměr: 130 x 150 x 25 mm

40303 *Chránič loketních/pažních nervů*

Chránič má za účel chránit loketní-pažní nervy před poškozením tlakem. Obtočí se kolem ruky, zajistí suchým zipem a pak se ruce opět přisunou k tělu.

Rozměr: 330 x 460 x 6 mm



40304 *Oválný chránič loketních/pažních nervů*

Tento model má stejné použití jako 40303, díky svému tvaru však umožňuje vizuální kontrolu ruky a snadný přístup pro podávání anestetik. Podložka je přetočena přes loket a zajištěna suchým zipem.

Rozměr: 400 x 150 x 13 mm



40306 *Profilovaná podložka paže - velká*



Rozměr: 610 x 146 x 57 mm

40307 *Profilovaná podložka paže - malá*

Rozměr: 406 x 140 x 51 mm

40310 *Profilovaná podložka paže - střední*

508 x 146 x 57 mm

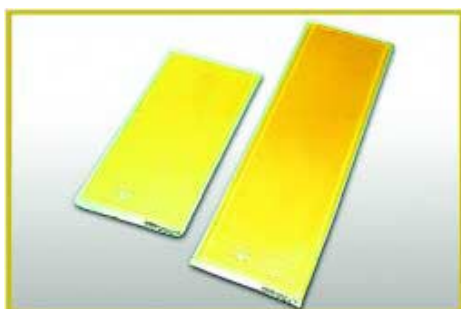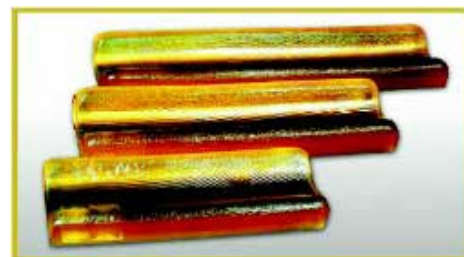

40308 *Velká podložka paže - dlouhá*

610 x 165 x 10 mm

40309 *Velká podložka paže - krátká*

381 x 165 x 6 mm



20401 Chráníč kotníku a paty, lokte

10 mm (sada 2 ks)

20401A Chráníč kotníku a paty, lokte

5 mm (sada 2 ks)

40400 Podložka pod nohu/chráníč kotníku a kolena

Podložka se používá na stojany a podpěry nohou. Je možné použít ji i jako podložku ruky nebo stočit a aplikovat jako polohovadlo.

Rozměr: 100 x 305 x 6 mm



40401 Chráníč kotníku a paty


Tato ochranná podložka je vhodná pro všechny procedury vyžadující dlouhodobou nehybnost a vytvářející tlak na oblast kotníku. Použití je jednoduché - pacientovo chodidlo se vloží do chrániče a zajistí suchým zipem. Rozměr: 200 x 320 x 13 mm

40402 Podložka pod koleno - malá

Jedná se o podložku určenou pro závěsy nohou (kolen) pro použití v gynekologii, urologii a OB. Dále může být uplatněna pro ochranu podkolení oblasti nebo v pediatrii. Rozměr: 229 x 279 x 10 mm

40403 Podložka pod koleno - středně velká

Jedná se o větší variantu modelu 40402. Tuto podložku je možno použít v oblasti slabín, kolen, kotníků nebo ledvin, leží-li pacient na straně. Stočená podložka může být využita v pediatrii nebo neonatologii pro oblast podpaží. Rozměr: 279 x 430 x 6 mm

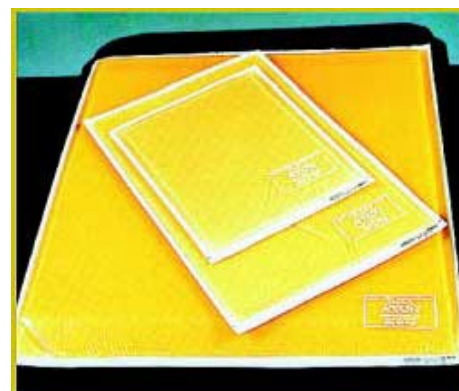

40404 Podložka pod koleno - velká

Tato podložka je doporučena pro použití na velkých závěsech nohou (urologického typu). Může také sloužit pro účely jako modely 40402 a 40403. Podložka je účinnou ochranou proti tlaku a má univerzální použití na operačních sálech, urologických ordinacích a chirurgických centrech. Rozměr: 560 x 500 x 13 mm



40500 Podložka pro závěs nohy a chodidla

Tento model podložky slouží k ochraně spodní části pacientovy nohy a oblasti kotníku v Allenových opěrkách. Vhodné použití je zejména, leží-li pacient v litotomické poloze při gynekologickém nebo urologickém zásahu ale i při procedurách týkajících se konečnicku nebo tračnicku. (sada 2 ks)



40501 Kryt závěsných tyčí

Podložka je vhodná pro pacienty ležící v litotomické poloze při urologických nebo gynekologických procedurách. Chrání pacienta před otlaky a zraněním, ke kterým může dojít při styku s kovovými závěsnými tyčemi. Navléknou-li se kryty na tyče, nemusí se sundávat po každém zákroku a tím se vyloučí časté únavné navlékání a sundávání krytů. Velmi dobrou kombinaci získáme, doplníme-li tyto kryty o model 40401 (chránič kotníku).
Rozměr: 711 x 51 mm (sada 2 ks)



40510 Podložka pod patu

317 x 47 x 10 mm

40511 Podložka pod patu

441 x 47 x 10 mm

40502 Podložka pod patu

Uvedená podložka poskytuje stejnou ochranu pro oblast kotníku jako model 40401, nevyužívá však suchého zipu. Pacientův kotník se jednoduše uloží do výřezu v podložce. Průstřih v zadní části zajišťuje ochranu oblasti achilovy šlachy. Navíc tyto podložky umožňují vícenásobné kombinace a tím poskytují rychlou a snadnou ochranu pro jakékoliv kosti před otlaky.
Rozměr: 150 x 83 x 45 mm



40520 Chránič paty (2ks)

40600 Kryt na podložku hrudního koše

Tato podložka se používá k obalení podložky typu staph check, kterými jsou jednotlivá oddělení vybavena. Zároveň je možné ji použít jako samostatné polohovadlo. Rozměr: 450 x 450 x 13 mm



40601 Kryt podpažní vložky


Identický jako model 40600, ale menších rozměrů. Rozměr: 305 x 430 x 13 mm

40602 Malé polohovadlo

Tato malá opěrka eliminuje používání pytlů s pískem. Je velice univerzální a vhodná pro nejrůznější zákroky, např. pro podložení paží, kotníků nebo nohou. Velice užitečná je i při tracheotomii, thyroidektomii, procedurách s mandlemi, operacích kataraktu a dalších operacích očí. Rozměr: 114 x 254 x 50 mm

40605 Velké polohovadlo

Jedná se o větší variantu modelu 40602. Tato podložka je ideálním polohovadlem pro pacienty ležící na boku. Použitelné je také pro podepření končetin. Rozměr: 114 x 355 x 50 mm

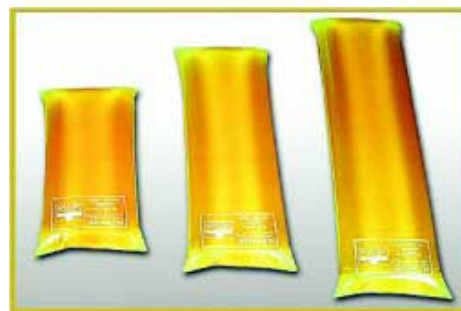

40615 Velké prodloužené polohovadlo

Rozměr: 100 x 460 x 51 mm



40603 Obloukovité polohovadlo pacienta

Profil podložky ve tvaru půlkruhu a plochá spodní strana podložky zajišťují maximální ochranu proti tlakům pod kolena, leží-li pacient na zádech. Může být také použita aby pacientovi ležícímu na břiše nepadala chodidla. Používá se pro podložení nártů nebo chodidel proti desce v poloze semi-fowler. Rozměr: 360 x 150 x 76 mm




40604 Stupňované polohovadlo hrudníku

Stupňovaná nebo tekutá konfigurace této podložky umožňuje úplné natažení hrudníku. Tento model podložky je vyvinut pro operace srdce a hrudníku, které vyžadují úplnou hyperextenzi (rozevření) hrudníku. Podložka může být také použita pod kolena nebo mezi kolena při pozici v leže na zádech, kde poskytuje velmi dobrou ochranu nervstva. Rozměr: 230 x 360 x 50 - 38 mm



40612 *Univerzální kryt pro Vac-Pac*

Podložka slouží jako kryt na Vac-Pac (pytel) při ortopedických, hrudních a urologických procedurách, které vyžadují stabilní polohu na boku. Ideální je podložka také při operacích kyčlí, ledvin a jater.
Rozměr: 710 x 940 x 13 mm

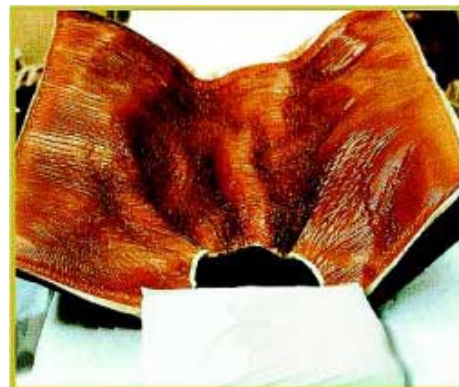

40613 *Kryt pro Vac-Pac tvaru T*

Použití tohoto krytu/podložky je stejné jako u 40612. Tvarem je však přizpůsoben pro Vac-Pac ve tvaru písmene T.
Rozměr: (horní) - 865 x 380 mm, (boční) - 585 x 230 mm

40614 *Souprava pediatrických polohovacích podložek*

Tato souprava je víceúčelovou sestavou podložek pro polohování a ochranu novorozenců během nejrůznějších zákroků a procedur. Souprava se skládá z obdélníkové podložky s výřezem uprostřed pro použití podkovovité podložky a dvou polohovacích trubic k umožnění roztažení hrudi. Možnosti použití: položením podložky rovně, bez trubic zamezíme otáčení pacienta při pozici na zádech. Umístěním jedné trubice pod podložku do oblasti hrudníku se tento rozšíří a umožní operace ventrálního hrudníku. Použitím malé trubice pod podložkou v oblasti thoraxu a velké trubice pod podložkou pod křížem, získáme snadný přístup ke spodní části páteře, např. při resekci tumoru páteře. Rozměr: 508 x 229 x 50 mm



40616 - 40621 *Válcová polohovadla hrudi s plochou spodní stranou*

Tento druh polohovadel hrudi je vyráběn v mnoha velikostech, aby mohly být použity pro každého pacienta. Chrání celou oblast pacientovy hrudi proti tlakům při pozici na břicho a poskytuje zvýšenou stabilitu proti otáčení. Tato polohovadla mají širokou škálu použití při nejrůznějších procedurách.
Rozměry: 305 x 100 mm, 406 x 100 mm, 508 x 100 mm, 305 x 150 mm, 406 x 150 mm, 508 x 150 mm



40639 - 40646 *Válcová polohovadla hrudi s plochou spodní stranou pro pediatrii*

Rozměry: 150 x 50 mm, 200 x 50 mm, 255 x 50 mm, 305 x 50 mm, 150 x 75 mm, 200 x 75 mm, 255 x 75 mm, 305 x 75 mm

40622 - 40624 *Tvarované podložky hrudi s plochou spodní stranou*

Tvar těchto podložek je přizpůsoben pacientovu hrudnímu koši. Spodní plochá strana zajišťuje maximální stabilitu a umožňuje širokou oblast použití. Tento model, který je dodáván ve třech velikostech je také často používán pod kolena a pod kotníky k jejich podložení a nadzvednutí. Varianta 40624 je dlouhá 500 mm a je použitelná k zajištění pacienta v pozici na boku.

Rozměry: 305 x 160 x 130 mm
 406 x 160 x 130 mm
 508 x 160 x 130 mm




40625 *Polohovadlo hrudi (pouze levá část)*

Rozměr: 710/585 x 203 x 76 mm

40626 *Polohovadlo hrudi (pouze pravá část)*

Rozměr: 710/585 x 203 x 760 mm




Tato souprava je přizpůsobená tak, aby odpovídala tvaru oblasti od ramen k hrudi a má zakulacené hrany pro ochranu podpažních partií. Souprava poskytuje optimální polohu horní části těla a zmenšuje tlak v oblasti thoraxu.

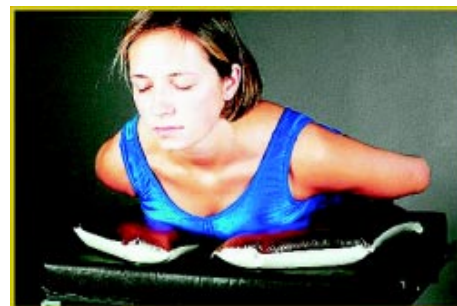

40630 *Trapézové polohovadlo*

Hlavní význam má tato podložka při chirurgických procedurách, při kterých musí mít pacient nohy od sebe odděleny. Může být také použita jako stabilizační polohovadlo, nebo k zajištění chodidel. Rozměr: 254 x 178 x 89 mm



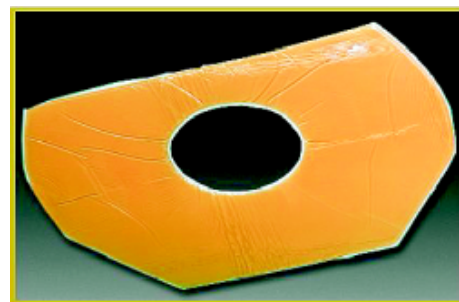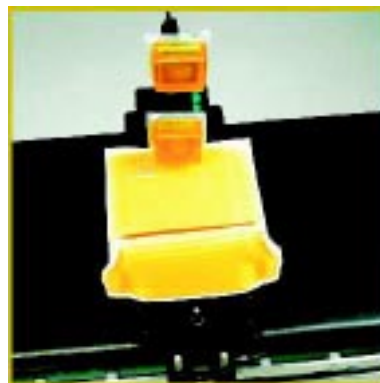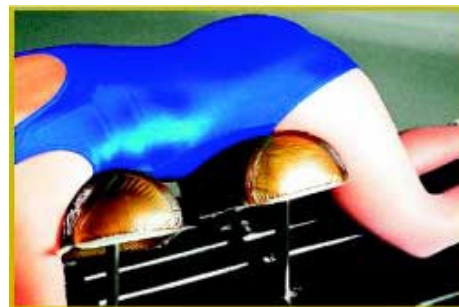

Kit 002 Sada záplat pro malé opravy podložek

Slouží pro snadné a rychlé opravy menších poškození, jako jsou propíchnuté nebo natržené podložky Action.
Rozměr: 100 x 100 mm

Kit 003 Role na opravy podložek

Slouží pro snadné a rychlé opravy větších poškození podložek Action.
Rozměr: 910 x 100 mm



4200 Podložka do kočárku/kolébky - typ Professional

AKTON® podložka, která má za účel snížit kožní problémy novorozenců způsobené tlakem a namáháním.
Rozměr: 305 x 660 x 13 mm

Následující podložky jsou vyráběny v několika provedeních - typech. Zde je jejich stručný popis.

Typ COMMUTER

Tento druh podložek je doporučen pro krátkodobé používání pro pacienty vystavené nízkému riziku. Skládá se z horní 12,7 mm silné vrstvy AKTON® a 44,5 mm vrstvy pěnového materiálu. Podložky jsou ve vodotěsném obalu, který je vhodný i pro osoby trpící inkontinencí. Přes tento obal je natažen tkaný kryt s antiskluzovou spodní stranou. Jsou dodávány v modré a černé barvě.

Typ CENTURIAN

Tyto podložky jsou vhodné pro střednědobé používání a pro osoby, které potřebují stabilnější oporu. Doporučujeme je pro pacienty vystavené střednímu riziku. Jsou tvořeny horní 15,9 mm silnou vrstvou AKTON® a stejně silnou spodní vrstvou pěnového materiálu. Podložky jsou ve vodotěsném obalu, který je vhodný i pro osoby trpící inkontinencí. Přes tento obal je natažen tkaný kryt s antiskluzovou spodní stranou a se dvěma rukojeťmi. Jsou dodávány v modré a černé barvě.

Typ PILOT

Jedná se o podložky určené pro dlouhodobé použití. Jsou vhodné pro pacienty vystavené střednímu a vysokému riziku. Mohou být použity pro osoby sedící v jedné pozici 8 a více hodin nebo na lůžku. Jsou tvořeny 25,4 mm silnou vrstvou materiálu AKTON®. Podložky jsou opatřeny tkaným obalem s antiskluzovou spodní stranou a se dvěma rukojeťmi. Jsou dodávány v modré a černé barvě.

Typ PROFESSIONAL

Tento druh podložek je vhodný pro dlouhodobé použití a pro pacienty vystavené vysokému riziku. Podložky mohou být použity pro osoby sedící v jedné pozici 8 a více hodin. Jsou tvořeny 41,3 mm silnou vrstvou materiálu AKTON®. Podložky jsou opatřeny tkaným obalem s antiskluzovou spodní stranou a se dvěma rukojeťmi. Jsou dodávány v modré a černé barvě.

5100 Podložka na židli - typ Professional

Tato AKTON® podložka je potažena v omyvatelném obalem zapínatelným na zip a opatřena háčky.
Rozměr: 406 x 406 x 41 mm

5105 Podložka na židli - typ Professional

Rozměr: 406 x 457 x 41 mm

5108 Podložka na židli - typ Profesional

Rozměr: 457 x 457 x 41 mm

512020 Podložka na židli - typ profesional

Rozměr: 508 x 508 x 41 mm

5110 Tkaný kryt

Se suchým zipem. Při objednávce specifikujte typ podložky, kterou chcete pokrýt a barvu krytu (černá, modrá)



5200 Podložka na židli - typ Centurian

Skládá se ze dvou stejně silných vrstev pěnového materiálu a materiálu AKTON®. Podložka je pokryta tkaným obalem na suchý zip, pod kterým je elastický vodotěsný kryt, vhodný i pro osoby trpící inkontinencí.
Rozměr: 406 x 406 x 32 mm

5205 Podložka na židli - typ Centurian

Rozměr: 406 x 457 x 32 mm

5208 Podložka na židli - typ Centurian

Rozměr: 457 x 457 x 32 mm

522020 Podložka na židli - typ Centurian

Rozměr: 508 x 508 x 32 mm



9000 Podložka na židli - typ Pilot

Podložka je stejná jako model 5100, ale podstatně lehčí. Rozměr: 406 x 406 x 25 mm

9005 Podložka na židli - typ Pilot

Jedná se o větší variantu modelu 9000. Rozměr: 406 x 457 x 25 mm

9008 Podložka na židli - typ Pilot

Rozměr: 457 x 457 x 25 mm

902020 Podložka na židli - typ Pilot

Rozměr: 508 x 508 x 25 mm

8500 Podložka - typ Commuter

Tato ultralehká podložka vhodná pro krátkodobé použití je velice komfortní. Je tvořena kombinací pěnového materiálu a polymeru AKTON®. Rozměr: 406 x 406 x 57 mm

8505 Podložka - typ Commuter

Jedná se o větší variantu modelu 8500. Rozměr: 406 x 457 x 57 mm

561818 Podložka ADAPTIVE

Rozměr: 457 x 457 x 6 mm

541818 Podložka ADAPTIVE

Rozměr: 457 x 457 x 13 mm

531818 Podložka ADAPTIVE

Rozměr: 457 x 457 x 16 mm

CU1412 Podložka ADAPTIVE

Rozměr: 356 x 305 x 14 mm


CU1618 Podložka ADAPTIVE

Rozměr: 406 x 457 x 14 mm

CU2020 Podložka ADAPTIVE

Rozměr: 508 x 508 x 14 mm

COG Speciální kryt pro podložky ADAPTIVE

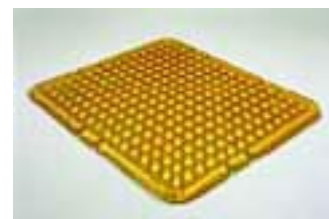

6500 Podložka pro kontrakturu

Uvolňuje napětí a tlak mezi kolena, leží-li pacient na boku nebo ve fetální pozici.

Rozměr: 508 x 508 x 13 mm

6400 Podložka COMBO

Kombinace podložky na invalidní vozík a na lůžko, opatřená krytem. Rozměr: 406 x 854 x 22 mm

6400H Podložka COMBO s uchycením

Rozměr: 406 x 854 x 22 mm

6405 Podložka COMBO

Rozměr: 406 x 952 x 22 mm

6405H Podložka COMBO s uchycením

Rozměr: 406 x 952 x 22 mm

7000S & 7000F Posilovač rukou

Posilovač je naplněn viskoelastickým materiálem. Je velmi odolný, omyvatelný a dezinfikovatelný, opatřený elastickým krytem. Typ struktury náplně: jemná (7000S), pevná (7000F). Rozměr: 41 x 67 x 127 mm

7010 Tkaný kryt

Tmavě modrý tkaný kryt pro model 7000S a 7000F.

6100 Podložka na lůžko - typ Professional

Rozměr: 432 x 686 x 22 mm

6200 Podložka na lůžko - typ Professional

Jedná se o model 6100 doplněný tkaným krytem na zip.



6300 Podložka na lůžko - typ Professional

Jedná se o větší variantu modelu 6100.

Rozměr: 686 x 686 x 1168 x 22 mm

6301 Podložka na matraci

Rozměr: 686 x 2032 x 16 mm

6301H Podložka na matraci s uchycením

Rozměr: 686 x 2032 x 16 mm

6302 Podložka na matraci

Rozměr: 889 x 2032 x 16 mm

6302H Podložka na matraci s uchycením

Rozměr: 889 x 2032 x 16 mm

6303 Podložka na matraci

Rozměr: 686 x 1880 x 16 mm

6303H Podložka na matraci s uchycením

Rozměr: 686 x 1880 x 16 mm

6304 Podložka na matraci



Rozměr: 686 x 1880 x 8 mm



NOVINKA !

Podložka ACTION do klozetového křesla typ COMMODE, rozměry 41x41x2.2 cm, s oválným výstřihem a sadou suchých zipů pro bezpečné připevnění ke klozetovému křeslu; podložka je vyrobena ze speciálního polymeru AKTON
Cena: 1712,- Kč

Podložka ADAPTIVE CG1818 je vhodná pro klienty vystavené střednímu a vysokému riziku. Může být použita pro osoby sedící v jedné pozici více hodin nebo na lůžku. Je tvořena 14 mm silným kostičkovým profilem z materiálu AKTON. Podložky mohou být opatřeny tkaným obalem s antiskluzovou spodní stranou a rukojeťmi (jako typ PILOT).
Cena: 4406,- Kč , Kód VZP: 12011, Úhrada VZP: 4000.- Kč

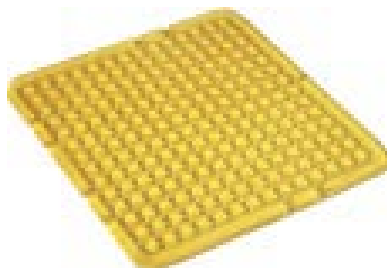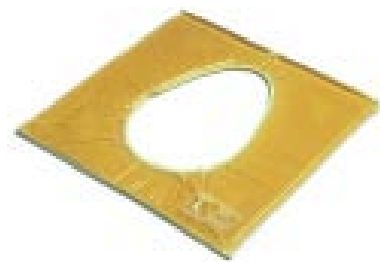

Podložka typ PILOT 9000

Jedná se o podložky určené pro dlouhodobé použití. Jsou vhodné pro pacienty vystavené střednímu a vysokému riziku. Mohou být použity pro osoby sedící v jedné pozici 8 a více hodin nebo na lůžku. Jsou tvořeny 25,4 mm silnou vrstvou materiálu AKTON®. Rozměr: 41 x 41 cm

Cena: 3 081,- Kč , Kód VZP: 12010, Úhrada VZP: 3 081,- Kč



Podložka typ COMBO 6400

Kombinace podložky na invalidní vozík a na lůžko. Jsou tvořeny 25,4 mm silnou vrstvou materiálu AKTON®. Pokud jsou použity do křesla (přeložené v tkaném obalu) mají rozměr 41 x 43 x 4,4 cm. Rozměr v rozloženém tvaru: 41 x 85 x 2,2 cm

Cena: 6 161,- Kč , Kód VZP: 12012, Úhrada VZP: 4000.- Kč



Podložka pod patu 40502

- poskytuje ochranu pro oblast kotníku, nevyužívá však suchého zipu. Pacientův kotník se jednoduše uloží do výřezu v podložce. Průstřih v zadní části zajišťuje ochranu oblasti achilovy šlachy. Navíc tyto podložky umožňují vícenásobné kombinace a tím poskytují rychlou a snadnou ochranu pro jakékoliv kosti před otlaky. **Cena: 1 290,- Kč/ks**



Chránič kotníku a paty, lokte 20401A

- je vhodný pro všechny procedury vyžadující dlouhodobou nehybnost a vytvářející tlak na oblast kotníku. Použití je jednoduché - pacientovo chodidlo/loket se vloží do chrániče a zajistí suchým zipem. **Cena: 1 980,- Kč/pár**

ACTION CB
Ing. Martin Vočadlo
Komenského 23
370 01 České Budějovice

tel., fax: ~~386 352 107~~
mob.: 777 110 236
e-mail: actioncb@cbox.cz
web: <http://actionpodlozky.zde.cz>

Výběr ze sortimentu,
ceny vč. DPH